




Dieses Produkt ist für die mehrfache Verwendung durch eine Person bestimmt. This product is intended for multiple use by one person. / Ce produit est destiné à un usage multiple par une seule personne. / Questo prodotto è destinato all'uso multiplo da parte di una sola persona.



Stand 01.06.2024



Schumacher GmbH
Schuhproduktion
Speyerer Str. 11
D-67365 Schwegenheim
www.liromed.de

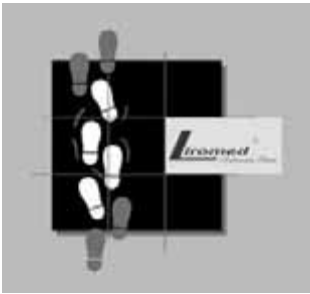

Verbandschuh (Langzeit)

Post-operative shoe (long-term use)

Chaussure à pansement (Longue durée)

Scarpa post operatoria (A lungo termine)



850-851-852 Schuhweite / Shoe width / Largeur de la chaussure / Larghezza della scarpa **L**

Artikel	Farbe	color	Couleur	Colore	Größe/Size/ Taille/ Taglie
850	schwarz	black	noir	nero	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/48, 49/50
851	schwarz	black	noir	nero	
851	marine	marine	bleu marine	navy	
852	sand	sand	sable	sabbia	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
852	bordo	bordo	bordeaux	bordo	

Leistenmaße / Dimensions / Dimension de la barre / Ultima dimensione

Schuhgrößen / Shoe sizes / Tailles de chaussures / Taglie delle scarpe	ME:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47/48	49/50
Länge / Length / Longueur / Lunghezza	mm	222	226	228	237	244	249	259	264	271	278	284	290	301	313
Vorfußbreite / Forefoot broadness / Largeur avant-pied / Larghezza avampiede	mm	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	105	112	116
Fersenbreite / Heel broadness / Largeur du talon / Larghezza del tacco	mm	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	71
Ballenmaße / Joint circumference / Mesures des balles / Dimensioni delle balie	mm	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	295	305
Zehenhöhe / Toes height / Hauteur d'orteil / Altezza punta del piede	mm	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	41

D Klassifikation

MD Gemäß den Klassifizierungsbestimmungen nach Anhang VIII handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse 1.

Erklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung dieses Medizinprodukts der Klasse 1 mit den grundlegenden Anforderungen des Anhangs 1 der MDR-Verordnung EU 2017/745

Garantie

Das Produkt hat eine Garantie auf Defekte betreffend Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 24 Monaten.

Material:

Obermaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Zwischenkaschierung: Moltoprenschaum
Stretch-Material am Schuh: Lycra (80% PA / 20% EA)
Hinterkappe außen: Kunstleder
Klettband 850: Kunstleder
Klettband 851-852: Textil
Einlegesohle: Mikroschaum/
Oberseite 100% Frottee
PU-Sohle / handvernäht

F Classificazione

MD Selon la classification déterminée à l'Annexe VIII, il s'agit d'un dispositif médical de classe 1.

Déclaration

Par la présente, nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce dispositif médical de classe 1 respecte les exigences fondamentales de l'Annexe 1 du règlement CE 2017/745.

Garantie

Ce produit dispose d'une garantie de 24 mois couvrant les défauts de matériaux et de finitions

Matériaux:

Tige: 100 % polyester
Doublure: 100 % polyester
Tissu intermédiaire: Mousse moltoprène
Matière stretch: Lycra (80 % PA / 20 % EA)
Capuchon arrière extérieur: Cuir synthétique
Bande velcro 850: Cuir synthétique
Bande velcro 851-852: Textile
Semelle intérieure: micro mousse / Dessus 100 % tissu éponge
Semelle: PU / cousue main

GB Classification

MD In accordance with the classification regulations in accordance with Annex VIII, these are Class 1 medical devices.

Explanation

We hereby declare in our sole responsibility that this class 1 medical device complies with the basic requirements of regulation EU 2017/745 Annex 1.

Warranty

We warrant this product against defects in materials and workmanship, for a period of 24 months.

Material:

Upper material: 100% polyester
Lining: 100% polyester
Lamination: moltopren foam
Stretch material: Lycra (80% PA / 20% EA)
Counter outside: synthetic leather
Velcro tape 850: synthetic leather
Velcro tape 851-852: textile
Insole: micro foam / upper side 100% terry
PU-sole / hand-stitched

I Classificazione

MD Secondo le regole di classificazione secondo l'allegato VIII, si tratta di dispositivi medici di classe 1.

Dichiarazione

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità di questo dispositivo medico di classe 1 con i requisiti di base dell'allegato 1 del Regolamento MDR UE 2017/745.

Garanzia

La garanzia del prodotto vale per i difetti di produzione e per i difetti dei materiali per un periodo di 24 mesi.

Materiali:

Tomaia: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Laminazione interna: Schiuma MTP
Materiale stretch della scarpa: Lycra (80% PA / 20% EA)
Capuccio posteriore esterno: Finta pelle
Cinturino in velcro 850: Finta pelle
Cinturino in velcro 851-852: Tessile
Soletta interna: Microschiuma / lato superiore 100% spugna
Suola: Suola PU / cucita a mano

D Gebrauchsanweisung

Mit diesem Hilfsmittel haben Sie einen qualitativ hochwertigen Verbandschuh erworben.

Lieferumfang: 1 Paar Verbandschuhe mit Gebrauchsanweisung.

Zweckbestimmung: Verbandschuh zum langzeitigen Einsatz zur Aufnahme des mit einem Wund- oder Polsterverband versehenen Fußes.

Indikation: Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, ggf. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.

Kontraindikation: Schwere Diabetes, nicht belastbare Korrekturosteotomien, offene Wunden, Hammerzehe D II und D III.

Produktmerkmale: Verbandschuh für den langzeitigen Einsatz, der ausreichend weit zu öffnen ist und genügendes Volumen zur Aufnahme des mit einem Wundverband versehenen Fußes und eventueller Bettung besitzt. Das Stretchmaterial ermöglicht eine weiche und flexible Anpassung bei fast allen Fußformen. Das dehnbare Material macht jede Bewegung mit und verhindert das Entstehen von schmerzenden Druck- bzw. Reibstellen. Rutschfeste Laufsohle, herausnehmbare Einlegesohle, geeignet für den Innen- und Außenbereich.



Wichtiger Hinweis: Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs durch zu festes Kletten vermeiden. Der Schuh ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet und nur zur Verwendung durch eine Person bestimmt. Der Schuh darf nicht auf offenen Wunden getragen werden. Der Schuh darf nur in unversehrtem Zustand verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Schuh fest, aber nicht zu eng geschlossen wird. Ein zu lockeres oder zu festes Anlegen des Schuhs kann den Therapieeffekt verringern oder zu Verletzungen führen. Bei Problemen mit ihren Füßen bitte den Arzt kontaktieren. Vorsicht bei Eis und Schnee. Nicht wasserfest.

Zurichtung des Obermaterials: zuschneiden, vernähen und neu einfassen ist möglich.

Zurichtung im Bodenbereich: Bearbeitung der Sohle durch Schleifen und Kleben möglich. Zurichtungen dürfen nur von ausgebildeten Orthopädieschuhtechnikern vorgenommen werden.

Anwendung: Verbandschuh aus flexiblem Material. Weite Öffnungsmöglichkeit und individuell einstellbarer Verschluss. Den Schuh nicht ohne die mitgelieferte oder individuell angefertigte Einlegesohle tragen. Schuhe vor jedem Tragen innen austasten und mögliche Fremdkörper entfernen.

Pflegehinweise: Den Schuh von Hand mit lauwarmem Wasser und einem milden Waschmittel reinigen. Bitte vermeiden Sie Schleifmaterialien wie Bürsten, Stahlwolle, Schleifpapier. Verwenden Sie keine aggressiven Produkte wie Alkohol, Ammoniak und Lösungsmittel. Den Schuh nach dem Reinigen an der Luft trocknen lassen. Nicht in bzw. auf direkten Wärmequellen trocknen. Desinfektion mit haushaltsüblichen Mitteln per Sprühdeseinfektion.

Produktentsorgung: Die Schuhe müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bitte nach dem Einsatz nicht in die Umwelt werfen.

Fragen und Probleme: Bei Fragen zum Produkt oder Problemen mit Ihrem Verbandschuh wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Orthopädieschuhtechniker. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen, schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller (s. Rückseite) und der für den Anwender zuständigen Behörde zu melden.

GB Instructions

With this medical aid you have purchased a post-operative shoe of a high quality.

Scope of delivery: 1 pair of post-operative shoes with instructions.

Purpose: Post-operative shoe for long-term use to accommodate the foot provided with a wound or padding dressing.

Indication: Postoperative or other wounds, also provided with expanded, where required cushioned bandages, whose healing process proceeding over a longer period of time and allows at least a partial weight bearing of the foot when walking, outside as well. Additional bedding is not required.

Contraindication: Severe diabetes, correcting osteotomies not to be strained, open wounds, hammer toe D II and D III.

Product characteristics: Post-operative shoe for long-term use, which can be opened sufficiently wide and has enough volume to hold the bandaged foot and possible bedding. The stretch-material allows a soft and flexible adjustment for nearly every foot shape. The expandable material moves along with every movement and prevents painful pressure marks. Non-slip outsole, removable insole, suited for indoor and outdoor areas.



Important advice: Avoid a disruption of the blood circulation through closing the shoe too tight. The shoe is not suited for reuse and only to be used by one person. The shoe must not be worn if one has open wounds. The shoe must only be used when intact. Be careful to close the shoe tight, but not too tight. Closing the shoe too loose or too tight might reduce the therapeutic effect or cause injuries. If you face any problems with your feet please contact a physician. Be careful in the event of ice and snow. Not waterproof.

Finish of the upper: Tailoring, sewing and new overcasting is possible.

Finish of the bottom area: Possible to adapt the sole through grinding and gluing adhesive bonding. Adjustments may only be made by trained orthopedic shoe technicians.

Application: Post-operative shoe made of flexible material. Possibility of wide opening and individually adjustable fastener. Refrain from wearing the shoe without the provided or individually made insole. Make sure to scan the inside of the shoes before each wearing and remove possible foreign objects.

Care instructions: Handwash the shoe using lukewarm water and a mild detergent. Please avoid abrasive materials such as brushes, steel wool or sandpaper. Do not use any aggressive products such as alcohol, bleach, ammonia or solvents. After cleaning let the shoe air dry. Do not let it dry in or on direct sources of heat. Disinfection with common household products by spray disinfection.

Product disposal: The shoes must be disposed of in compliance with local provisions. Please do not cast into nature after use.

Questions and problems: For questions about the product or problems with your post-operative shoe contact your specialist dealer or orthopedic shoe technician. All serious incidents that have occurred in connection with the product must be reported to the manufacturer (see reverse side) and the authority responsible for the user.

F Mode d'emploi

Avec ce dispositif technique, vous avez fait l'acquisition d'une chaussure pour pansements de haute qualité.

Contenu: 1 paire de chaussures pour pansements avec mode d'emploi.

Destination: Chaussure de bandage à usage prolongé pour accueillir le pied muni d'un pansement ou d'un rembourrage.

Indication: En post-opératoire ou pour plaies diverses, même soignées par des bandages extensibles et éventuellement rembourrés, dont le processus de guérison s'étend sur une longue période et permet au moins une sollicitation partielle du pied lors de la marche, même à l'extérieur. Une semelle supplémentaire n'est pas nécessaire.

Contre-indication: Diabète sévère, correction d'ostéotomies non tendues, plaies ouvertes, orteil en marteau D II et D III.

Caractéristiques du produit: Chaussure pour pansements conçue pour une utilisation de longue durée, dotée d'une ouverture assez large et disposant d'un volume suffisant pour accueillir un pied bandé et éventuellement une semelle. Les matériaux stretch permettent à la chaussure de s'adapter en douceur et avec souplesse à toutes les formes de pied. Les matériaux extensibles épousent chaque mouvement et empêchent l'apparition de points de pression et de friction douloureux. Semelle extérieure antidérapante, semelle intérieure amovible, convient aux espaces intérieurs et extérieurs.



Important: Ne pas trop serrer pour éviter toute entrave à la circulation sanguine. Cette chaussure ne se réutilise pas et est destinée à l'usage d'une seule personne. Cette chaussure ne doit pas être portée sur des plaies ouvertes. Cette chaussure ne peut être utilisée que dans un parfait état. Fermer la chaussure solidement mais sans trop serrer. Porter une chaussure de façon trop lâche ou trop serrée peut réduire l'effet thérapeutique ou provoquer des blessures. Contacter votre médecin en cas de problèmes avec vos pieds. Prudence en cas de gel ou de neige. Non imperméable.

Rectification de la tige: Il est possible de découper, coudre et placer une nouvelle bordure.

Rectification de la partie inférieure: Il est possible de modifier la semelle par ponçage et collage. Seuls des techniciens podorthésistes qualifiés sont autorisés à procéder aux rectifications.

Application: Chaussure de bandage en matériau flexible. Ouverture large et fermeture réglable individuellement. Ne pas porter la chaussure sans la semelle intérieure incluse dans la livraison ou fabriquée sur mesure. Avant toute utilisation, inspecter en palpant l'intérieur de la chaussure et retirer les éventuels corps étrangers.

Conseils d'entretien: Nettoyer la chaussure à la main avec de l'eau tiède et un détergent doux. Veuillez éviter les matériaux abrasifs tels que les brosses, la laine d'acier, le papier abrasif. N'utilisez pas de produits agressifs tels que l'alcool, l'ammoniaque et les solvants. Après le nettoyage, laissez la chaussure sécher à l'air libre. Ne pas sécher dans ou sur des sources de chaleur directes. Désinfecter avec des produits ménagers courants par pulvérisation.

Mise au rebut: Les chaussures doivent être mises au rebut conformément aux dispositions locales. Après utilisation, ne pas jeter dans la nature.

Questions et problèmes: Pour toute question sur le produit ou tout problème lié à votre chaussure pour pansements, veuillez vous adresser à votre revendeur ou votre technicien podorthésiste. Il convient de signaler au fabricant (voir au verso) et à l'autorité compétente pour l'utilisateur tous les incidents graves survenus avec le produit.

I Istruzioni d'uso

Con questo aiuto avete acquistato una scarpa post operatoria di alta qualità.

Ambito di consegna: 1 paio di scarpe da medicazione con istruzioni per l'uso.

Scopo: Scarpa post operatoria per uso prolungato per alloggiare il piede dotato di una medicazione per ferite o imbottitura.

Indicazione: Ferite post-operatorie o di altro tipo, anch'esse trattate con bendaggi estesi ed eventualmente imbottiti, il cui processo di guarigione avviene in un periodo di tempo più lungo e consente di portare almeno parzialmente il peso del piede durante la deambulazione, anche fuori casa. Non è necessaria una lettiera aggiuntiva.

Controindicazioni: Diabete grave, osteotomie correttive non portanti, ferite aperte, alluce a martello D II e D III.

Caratteristiche del prodotto: Scarpa post operatoria per uso prolungato, che può essere aperta in modo sufficientemente ampio e ha un volume sufficiente per accogliere il piede provvisto di una medicazione per ferita e di un'eventuale lettiera. Il materiale elastico consente una calzatura morbida e flessibile per quasi tutte le forme di piede. Il materiale elastico asseconda ogni movimento e previene lo sviluppo di punti di pressione o di attrito dolorosi. Suola antiscivolo, sottopiede estraibile, adatto per uso interno ed esterno.



Avviso importante: Evitare di ostacolare la circolazione sanguigna aderendo troppo strettamente. La scarpa non è riutilizzabile ed è destinata all'uso da parte di una sola persona. La scarpa non deve essere indossata su ferite aperte. La scarpa può essere utilizzata solo se intatta. Assicurarsi che la scarpa sia ben chiusa, ma non troppo. Una calzatura troppo allentata o troppo stretta può ridurre l'effetto terapeutico o causare lesioni. In caso di problemi ai piedi, contattare il medico. Attenzione al ghiaccio e alla neve. Non è impermeabile.

Finitura del materiale della tomaia: possibile tagliare, cucire e rilegare.

Finitura nella zona del pavimento: È possibile modificare la suola mediante molatura e incollaggio. Le regolazioni possono essere effettuate solo da tecnici ortopedici specializzati.

Applicazione: Scarpa post operatoria in materiale flessibile. Ampia apertura e chiusura regolabile individualmente. Non indossare la scarpa senza la soletta in dotazione o su misura. Prima di ogni utilizzo, tastare l'interno della scarpa e rimuovere eventuali corpi estranei.

Istruzioni di cura: Pulire la scarpa a mano con acqua tiepida e un detergente delicato. Evitare materiali abrasivi come spazzole, lana d'acciaio, carta vetrata. Non utilizzare prodotti aggressivi come alcol, ammoniaca e solventi. Lasciare asciugare la scarpa all'aria dopo la pulizia. Non asciugare all'interno o su fonti di calore dirette. Disinfettare con i comuni prodotti per la casa mediante disinfezione a spruzzo.

Smaltimento prodotti: e scarpe devono essere smaltite in conformità alle normative locali. Si prega di non gettarle nell'ambiente dopo l'uso.

Domande e problemi: In caso di domande sul prodotto o di problemi con la Scarpa post operatoria, rivolgersi al rivenditore specializzato o al tecnico di calzature ortopediche. Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore (vedi retro) e all'autorità responsabile dell'utente.